



ELITE 系列电泳仪


高中低电压电流区宽频段稳定供电技术

高、低电压区
轻松稳定输出

方形外观设计
堆叠整齐美观

键盘面板设计
维护成本低

欧盟CE认证
保护操作者安全

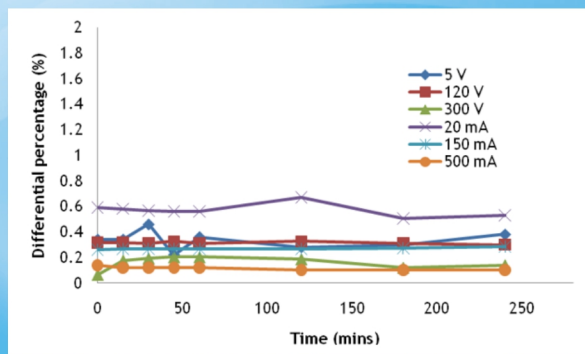

高、中、低电压区分别进行的长时间运行测试中，ELITE电泳仪表现出了优秀的供电输出稳定性。

ELITE电泳仪使用高分辨率模/数转换器，采用脉冲宽度调制(PWM)技术，能够高效、高精度地稳定为实验应用供电，主要用于核酸、蛋白方面电泳与转印的分子生物实验应用。ELITE电泳仪的生产工艺不仅在用户中得到广泛认可，也深刻影响了业界的生产标准，国际多家知名厂商与Wealtec公司在生产方面深度合作，共同研究实践电泳仪供电稳定性技术。从推向市场到现在10年多的时间，ELITE电泳仪目前依然是很多实验室用户心目中的首选产品。



ELITE 300



ELITE 300 PLUS

ELITE 300/300 PLUS电泳仪适合绝大多数电泳与转印应用，包括常用的水平电泳、垂直电泳、湿式转印等应用，是实验室常用的选择。



ELITE HC 2.0

ELITE HC 2.0 电泳仪拥有更广的电流输出范围，最高可达2A，特别适合半干转印这种需要高电流的应用，是一款通用型电泳仪。



ELITE 600U

ELITE 600U 电泳仪拥有更广的电压输出范围，最高可达600V，以及更高的功率输出，是ELITE300PLUS的升级款。



Mini ELITE

Mini ELITE电泳仪小巧轻便的外形，4档常用电压输出，体现出极简电泳仪设计风格，让你的电泳仪与众不同。



垂直电泳与转印系统



水平电泳与转印系统

指标	ELITE HC 2.0	ELITE 300	ELITE 300 PLUS	ELITE 600U	mini ELITE
输出终端	4组	4组	4组	4组	1组
输出电压(V)	5-200	10-300	10-300	5-600	50/80/100/120
电压调幅(V)	1	1	1	1	-
输出电流	0.01-2A	4-400mA	4-500mA	1-750mA	-
电流调幅	0.01A	1mA	1mA	1mA	-
最大功率	200W	75W	90W	150W	20W
计时器(min)	0-999	0-999	0-999	0-999	-
状态报警	有	有	有	有	-
触摸面板	有	有	有	有	调节钮
LED屏幕	有	有	有	有	-
重量(kg)	2.2	2	2	2	0.6
尺寸(cm)	24x32x7.3	24x32x7.3	24x32x7.3	24x32x7.3	8.4x17.5x5.2
安全认证	欧盟CE	欧盟CE	欧盟CE	欧盟CE	欧盟CE